



Control Medi Multi

Brukerveiledning

Art. Nr: 429200-3

Innholdsfortegnelse

NO: Norsk Brukerveiledning Control Medi Multi	4
1. Innledning	4
1.1 Produktbeskrivelse	4
1.2 Tiltent formål	4
1.3 Generell info om Control Medi	5
1.4 Tegnforklaring	6
1.5 Sette i batterier	6
1.6 Bytt batterier	6
2. Viktig informasjon	7
2.1 Sikkerhet	7
2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk	7
2.3 Alvorlige hendelser	7
2.4 Samsvar med kravene til medisinsk utstyr	7
2.5 Produktansvar	7
3. Innstillinger	8
3.1 Signal ved programmering	8
3.2 Avbryte programmering	8
3.3 Nivåer i Control Medi Multi	8
3.4 Åpne/låse innstillingslås	9
3.5 Lukke/åpne et nivå	10
3.6 Innlæring av IR-kanaler fra en annen sender	10
3.7 Legg inn GewaLink-kanal	11
3.8 Stille inn 4096-kode	12
3.9 Tilbakemelding ved knapptrykk	13
3.10 Innstilling av knappforsinkelse	14
3.11 Repetere siste funksjon	14
3.12 Lage automatisk sekvens (Makro)	15
3.13 Direktestyring	16
3.14 Kanalområde	17
4. Styring med skanning	18
4.1 Innstilling av skanningsstart	18
4.2 Innstilling av skanningshastighet	18
4.3 Innstilling av skanningsrunder	19
5. Legge inn GewaRadio (GR)	20
5.1 Legge inn GR-enhet og programmere GR-funksjon på valgfri knapp	21
5.2 Ta bort GR-enhet	22
6. Merking	23
7. Montering av Control Medi	23

8.	Sikkerhetskopiering og tilbakestilling	24
9.	Rengjøring	24
10.	Grunninnstillinger i Control Medi Multi	25
10.1	Tilbakestilling til grunninnstilling	25
11.	Tekniske data	26
11.1	Tekniske data	26
11.2	Tilbehør som følger med Control Medi Multi	26
11.3	Øvrig tilbehør til Control Medi	26
12.	Lagring og kassering	27
12.1	Oppbevaring	27
12.2	Kasseringl	27
13.	Sammenstilling Hurtigguide Gewa Control Medi Multi	28

NO: Norsk Brukerveiledning Control Medi Multi

1. Innledning

1.1 Produktbeskrivelse

Control Medi Multi er en programmerbar IR-sender som erstatter vanlige fjernkontroller til TV, DVD, Stereo m.m. Control Medi Multi har totalt 28 programmerbare knapper på 4 nivåer. Man trykker direkte på knappen for å sende et signal, og skifter nivå med *Nivå*-knappen. Det kan også kobles til en ekstern bryter som kan direktstyre en knapp på senderen.

Control Medi Multi har også mulighet for skanning for personer som ikke kan trykke direkte på knappene.

Control Medi Multi har dessuten innebygd GewaRadio-sender (GR) og kan programmeres for å fungere sammen med Gewa Andromeda IR/Radio-mottakere.

Når man trykker på en knapp, får man bekreftelse i form av vibrasjon, lys og lyd.

Control Medi-senderne er en del av "GewaLink-systemet" og kan derfor brukes med alle disse produkter.

1.2 Tiltent formål

Control Medi er en brukervennlig fjernkontroll som er ment å støtte personer som ikke kan bruke en vanlig fjernkontroll på grunn av motoriske, kognitive eller visuelle forstyrrelser. Enheten kan hjelpe brukeren med å styre elektronisk utstyr hjemme, inkludert TV-apparater, belysning, inngangs- og garasjeportåpnere. Apparatet kan brukes både innendørs og utendørs.

1.3 Generell info om Control Medi

Før man begynner å bruke Control Medi, er det en del man bør vite:

⚠ ADVARSEL: Sørg for at brukeren alltid kan få hjelp gjennom et reservesystem hvis produktet ikke fungerer som det skal.


⚠ ADVARSEL: Før du bruker produktet, må du kontrollere at alle tilkoblede apparater og elektronisk utstyr er riktig installert, og at de brukes på en sikker måte.

Control Medi leveres ferdig med GewaLink-kanaler innstilt på knappene. Det betyr at man kan begynne å bruke senderen direkte etter at batterier er satt inn. Se kapittel *Sett i batterier*.

- For å komme inn i programmeringsmodus, trykker man først på *Nivå*-knappen **samtidig** med en annen *Funksjons*-knapp i ca. 2 sekunder. Ulike *Funksjons*-knapper brukes når forskjellige ting skal programmeres.
- Om man gjør en feil, eller angrer på handlingen, er det bare å holde *Nivå*-knappen inne i to sekunder. Den fungerer som en *Avbryt*-knapp.
- Det er viktig at man ikke venter for lenge mellom de forskjellige handlingene i programmeringen. Etter en stund går senderen ut av programmeringen for å spare batteri.
- Om en knapp på Control Medi eller brytere blir holdt nede i mer enn 1 minutt, vil Control Medi skru seg av for å spare batteri.
- Innstillingene kan beskyttes med innstillingslås.
- Man kan bare endre innstillingene på nivåer som er ulåst/åpnet.





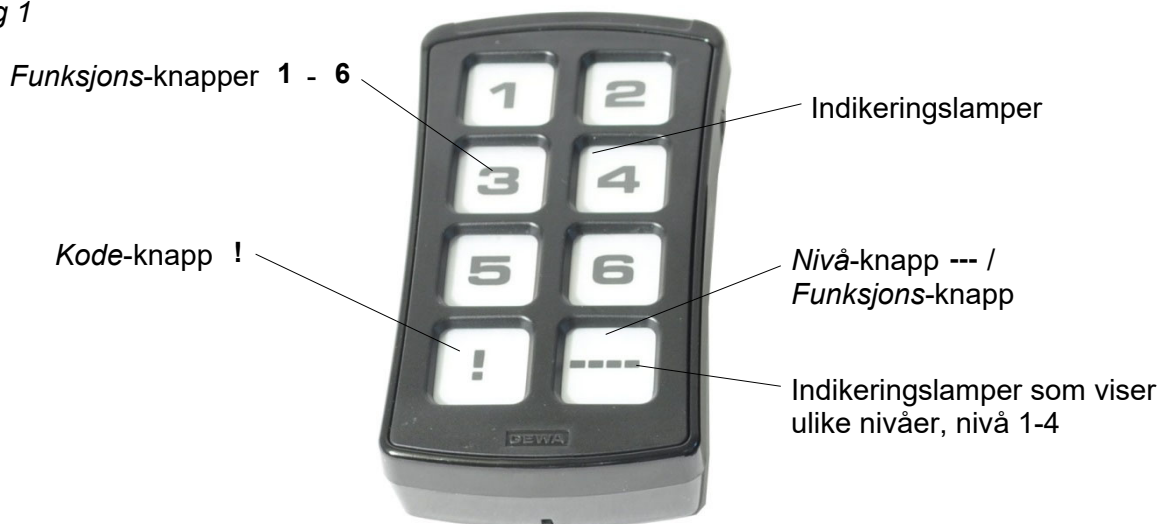

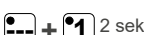
Bildet viser forskjellige betegnelser og funksjoner som forekommer i teksten.

Fig 1



1.4 Tegnforklaring

Følgende symboler finner du i teksten:

-  Valgfri knapp på Control Medi
-  Valgfri knapp på annen sender som skal læres inn
-  Knapp 1-6
-  Kode-knapp
-  Nivå-knapp
-  Nivå-knapp som holdes nedtrykt i ca. 2 sekunder
-  Nivå-knapp og knapp 1 som holdes nedtrykte i ca. 2 sekunder

1.5 Sette i batterier

Løsne skruene til batteriluken på baksiden av Control Medi med en skrutrekker og sett inn 3 stk. alkaline batterier type LR03 (AAA) 1,5 V. Plasser batteriene riktig polvendte i forhold til markeringen som vises i bunnen av batterirommet.

MERK: Bruk ikke-oppladbare alkaliske batterier til Control Medi Multi.

1.6 Bytt batterier

Når batteriene må skiftes ut, blinker LED-indikatoren rødt og en lang og tre korte pip gjentas to ganger.



2. Viktig informasjon

Før du bruker produktet, må du lese og forstå innholdet i denne bruksanvisningen.

2.1 Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

 **ADVARSEL:** Risiko for personskade eller dødsfall hvis instruksjonene ikke følges.

 **FORSIKTIGHET:** Risiko for skade på produktet hvis instruksjonene ikke følges.

MERK: Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

 **ADVARSEL:** Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Sørg for at brukeren alltid kan få hjelp gjennom et reservesystem hvis produktet ikke fungerer som det skal.
- Før du bruker produktet, må du kontrollere at alle tilkoblede apparater og elektronisk utstyr er riktig installert, og at de brukes på en sikker måte.
- Snorlåsen er en sikkerhetsdetalj som skal forhindre kvelning. Kontroller at halsbåndets ender lett kan dras ut hvis for eksempel senderen skulle sitte fast i noe. Lag aldri knuter på halsbåndet!

2.3 Alvorlige hendelser

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til produsenten og myndighetene i ditt land.

En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller indirekte kan ha ført til, eller kan føre til, en av disse situasjonene:

- Dødsfall til en pasient, bruker eller annen person.
- Midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av pasientens, brukerens eller andres helsetilstand.
- En alvorlig trussel mot folkehelsen.

2.4 Samsvar med kravene til medisinsk utstyr

Produktet markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med fysiske funksjonshemninger, og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinsk utstyr.



2.5 Produktansvar

Produktet er utviklet og risikovurdert i henhold til ISO 14971. Brukerhåndboken og de tekniske spesifikasjonene er utført i samsvar med sikkerhetsvurderingene oppført i risikoanalysen. Ta alltid hensyn til sikkerheten når du bruker produktet. Hvis produktet brukes på andre måter enn det det er beregnet for, kan det innebære en risiko som Abilia AB ikke tar ansvaret for. Produktets beregnede levetid gjelder når det brukes i samsvar med tiltenkt bruk og vedlikeholdsinstruksjonene.

Abilia AB er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skader eller følgeskader hvis produktet har vært brukt eller installert på noen annen måte enn det som er spesifisert i dette dokumentet. Enhver form for skade eller tukling med produktet, ugyldiggjør garantien og fraskriver produsenten alt ansvar.

3. Innstillinger

Følgende avsnitt beskriver hvordan en stiller inn Control Medi Multi's ulike funksjoner.

For å komme inn i programmeringsmodus trykker man først på *Nivå*-knappen  og deretter samtidig på knappen  i 2 sekunder før ønsket innstillingsvalg (se under). Når man slipper knappene høres signalet for "Innstilling" og indikeringslampen på knappen for innstillingsvalget blinker. Signalet "Feil" kommer hvis man gjør et ugyldig innstillingsvalg.

Trykk samtidig	Innstillingsvalg
 +  2 sek	Funksjon
 +  2 sek	System
 +  2 sek	Tillbakestilling
 +  2 sek	Skanning
 +  2 sek	Zwave

Deretter følger separate innstillingsvalg (se beskrivelse under).

Det er viktig ikke å vente for lenge mellom de forskjellige valgene i programmeringen. Etter en stund går Control Medi ut av programmering for å spare strøm.


Om programmering lykkes, kommer signalet "Vellykket". Om det er feil eller tar for lang tid, kommer signalet "Feil".

3.1 Signal ved programmering

Ved programmering gir Control Medi tilbakemelding med lyd og lys.

Signal "Innstilling",  (tre toners stigende signal).

Signal "Vellykket",  (tre positive toner).

Signal "Feil",  (åtte negative toner).

3.2 Avbryte programmering

For å avbryte programmering, holdes *Nivå*-knappen  inne i mer enn 2 sekunder.

3.3 Nivåer i Control Medi Multi

Control Medi Multi har totalt fire nivåer med 7 programmerbare knapper. De er ved levering innstilt med GewaLink-kanaler 16-39 på nivå 1-4, se *Tabell 1*. Det er helt valgfritt om en vil bruke ett, flere eller alle fire nivåene. Fire indikeringslamper viser hvilket nivå en befinner seg på. (se *Fig 1*).




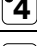




Control Medi Multi leveres kun med nivå 1 åpent. For å åpne flere nivåer se neste avsnitt: *Åpne/lukke et nivå*.

Når kun ett nivå er åpent, inneholder *Nivå*-knappen  automatisk en kanal som alltid er den første kanalen på det neste nivået. Dermed går det an å betjene 8 funksjoner selv om bare ett nivå er åpent. Se ¹ i *Tabell 1*.

Når flere nivåer er aktive, bytter en nivå ved å trykke på *Nivå*-knappen . For hvert trykk går en opp ett nivå.

Tabell 1: Grunninnstilling GewaLink-kanaler

Tabell 1 viser hvilke kanaler/koder som følger Control Medi Multi ved levering.

GewaLink-kanalenes plassering				
Knapp på Control Medi Standard	Nivå 1-4 (indikeres rødt)			
	1	2	3	4
	16	22	28	34
	17	23	29	35
	18	24	30	36
	19	25	31	37
	20	26	32	38
	21	27	33	39
 ²	kode	kode	kode	kode
 ¹	22	28	34	16

¹ Hvis kun ett nivå er åpent blir *Nivå*-knappen automatisk en kanal. Det er den første kanalen på neste nivå.

² Samme kode på alle nivåer.






MERK: Denne tabellen viser hvordan GewaLink-kanalen kommer fra fabrikk. Det er mulig å gjøre om på dette (se *Kanalområde*).

3.4 Åpne/låse innstillingslås

For å beskytte innstillingene i Control Medi kan man aktivere innstillingslås.

Når denne er aktiv er alle innstillingene beskyttet. Prøver man å gjøre en programmering når denne er på, kommer bare signalet "Feil".

Gjør følgende for å åpne/låse innstillingslås:

1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene hører man signal "Innstillinger" og indikeringslampen på knapp1 blinker.
2. Trykk på .
3. Trykk på  for å åpne innstillingslåsen eller  for å låse.
4. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Åpne/låse innstillingslås








 + ^{2 sek}, , trykk deretter ønsket valg  eller .

 = Åpne.  = Låse.







Grunninnstilling: Åpnet

3.5 Lukke/åpne et nivå

Control Medi har fire forskjellige nivåer, noe som betyr at hver knapp kan ha fire forskjellige funksjoner. Du kan velge hvilke nivåer skal være åpne og dermed hvor mange funksjoner hver knapp skal ha. Du bør lukke nivåene der ikke brukes. er.

1. Trykk først på  og samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene, hører man signalet "Innstilling", og indikeringslampen på knapp 1 blinker.
2. Trykk på . Lampen for aktuelt nivå lyser nå.
3. Trykk frem til det nivået som skal åpnes/lukkes med .
4. Trykk på  for å lukke nivået eller  for å åpne nivået. Lampen for nivået flytter seg automatisk til neste nivå som da kan åpnes eller lukkes.
5. Trykk på  i 2 sekunder for å avslutte.
6. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Åpne/lukke nivå

 +  2 sek, , velg nivå med , trykk deretter ønsket valg  eller ,  2sek.








 = Lukke.  = Åpne.

Grunninnstilling: Nivå 1 åpnet

3.6 Innlæring av IR-kanaler fra en annen sender

Forsikre deg om at batteriene i begge senderne har full kapasitet. Plasser ikke senderne i direkte sollys under innlæring.

Legg begge senderne på et bord med originalsenderen rettet mot bakenden på Control Medi, se bilde.

1. Trykk først på  og deretter samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene, hører man signalet "Innstilling", og indikeringslampen på knapp 1 blinker.
2. Trykk på .
3. Velg det nivået hvor det skal innprogrammeres ved hjelp av .
4. Velg den knapp  som skal læres opp. Lampen for valgd knapp lyser nå fast, og signalet "Trykk" lyder.
5. Trykk og hold inne den knappen  på originalsenderen som skal kopieres over til Control Medi. Slipp når lampen på Control Medi slukker og signalet "Slipp" høres. Det kan ta opp til 10 sekunder. Hvis lampen fortsatt lyser og signalet "Trykk" høres, gjenta en eller flere ganger til signal "Vellykket" lyder.
Om signal "Feil" kommer, betyr det at innlæringen var mislykket. Forsøk nok en gang fra punkt 4.
6. Om innlæringen lykkes med første knappen, går en videre med punkt 4 og 5 til alle knappene er innprogrammerte.
7. Avslutt med å trykke på  i 2 sekunder.
8. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".
9. Test nå Control Medi's innprogrammerte funksjoner på det apparatet som skal betjenes.



Originalsender

Innlæring av IR-kanaler

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , velg knapp , gå videre eller avslutt med 2 sek

Viktig! Når kun **ett nivå** benyttes, vil *Nivå*-knappen automatisk inneholde kanalen på neste nivå's første knapp, se *Tabell 1*. Det innebærer at det er fullt mulig å lære inn på *Nivå*-knappen når kun ett nivå er åpent.

3.7 Legg inn GewaLink-kanal

Control Medi Multi leveres med GewaLink kanal 16-39.(se *Tabell 1*) Hvis man vil legge inn en annen GewaLink-kanal kan men legge den inn slik:

1. Trykk først på og så samtidig på i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og lampen på knapp 1 blinker.
2. Trykk på og så på . Lampen for aktuelt nivå blinker.
3. Trykk frem til det nivået kanalen skal opprettes med .
4. Velg knapp der GewaLink-kanalen skal lagres.
5. Velg **Kanalområde**, = GewaLink 00 – 63. = GewaLink 64 – 127.
6. Velg **Kanalgruppe** enligt *Tabell 2* nedenfor.
7. Trykk på den **Knapp** som er i den kanalgruppen som gir riktig GewaLink-kanal som vist i *Tabell 2*.
8. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Tabell 2: Kanalgruppe og knapp for å legge inn GewaLink-kanal

Kanalområde : GewaLink 00-63								
Knapp	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe
	00	08	16	24	32	40	48	56
	01	09	17	25	33	41	49	57
	02	10	18	26	34	42	50	58
	03	11	19	27	35	43	51	59
	04	12	20	28	36	44	52	60
	05	13	21	29	37	45	53	61
	06	14	22	30	38	46	54	62
	07	15	23	31	39	47	55	63
Kanalområde : GewaLink 64-127								
Knapp	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe	Kanalgruppe
	64	72	80	88	96	104	112	120
	65	73	81	89	97	105	113	121
	66	74	82	90	98	106	114	122
	67	75	83	91	99	107	115	123
	68	76	84	92	100	108	116	124
	69	77	85	93	101	109	117	125
	70	78	86	94	102	110	118	126
	71	79	87	95	103	111	119	127

Legg inn GewaLink-kanal

☰ + 1^{2 sek}, 2, 1, velg nivå med ☰, velg knapp X, velg **Kanalområde**, velg Kanalgruppe, velg GewaLink-kanal.

Se *Tabell 2* for valg av kanalgruppe og GewaLink-kanal.

Eksempel: Man vil legge GewaLink-kanal 28 på en knapp X.

☰ + 1^{2 sek}, 2, 1, velg nivå, X, 1, 4, 5.

3.8 Stille inn 4096-kode


Control Medi leveres med en spesiell kodet kanal (4096) på *Kode*-knappen !. Denne koden er tilfeldig valgt. Denne kodede kanalen brukes normalt for funksjoner som stiller større krav til sikkerhet, som for eksempel leilighetsdør eller villadør. Koden har 4096 forskjellige kombinasjonsmuligheter og har alltid samme kode uansett hvilket nivå en befinner seg på. Trenger en å legge inn en ny kodet kanal, så finnes det to metoder å gjøre dette på.

Første metoden er å lære inn fra en kodet sender som er beskrevet i avsnittet *Innlæring av IR-kanaler fra en annen sender*.

For **metode to** knappes det inn en binær kode. En kan selv velge den binære koden eller bruke en kode som allerede er lagt inn i en IR-mottager eller IR-sender.

Det finnes to typer IR-mottagere. En eldre type av mottagere der kodeinnstillingen gjøres med en 12-polet omkopler eller nyere der IR-mottageren er programmerbar. Prinsippet er det samme uansett hvordan den binære koden lages. I *Fig 3* ser du en 12-polet omkopler avbildet. Omkoplerne 1, 4, 6 og 12 står i "On"-stilling de øvrige står i "Off"-stilling.

Fig 3

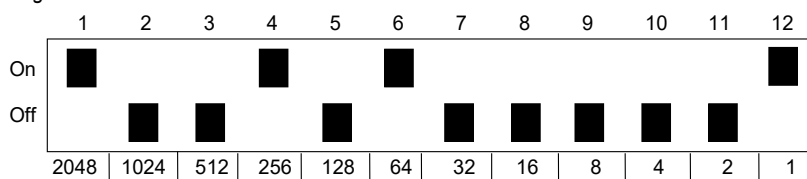

Følgende eksempel beskriver hvordan den binære koden lages enligt metode to:

1. Trykk først på ☰ og så samtidig på 1 i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 1 blinker.
2. Trykk på 2 og så på 2 igjen.
3. Velg nivå der 4096-koden skal lagres med ☰.
4. Velg knapp X der 4096-koden skal lagres. (Vanligst !-knappen.)
5. Legg inn koden ved å trykke på 1 respektivt 2.
1 = omkopplere i Off-stilling og 2 = omkopplere i On-stilling.
Lag 12 trykk i tur og orden: 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2 (Fig 3).
6. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".
7. Koden er nå lagt inn på valgd knapp.

MERK: Koden ovenfor er bare et eksempel og vil være forskjellig for ulike brukere. Noter koden for eventuelt framtidig behov.

MERK: Om man skal lage en ny kode på *Kode*-knappen må denne lagres på alle nivåer for at den skal bli lik.

Legg inn 4096-kode

+ 2 sek, , , velg nivå med , velg knapp , trykk eller 12 ganger.

= Off-stilling. = On-stilling.

Grunninnstilling: Tilfeldig kode

Kopiere knapp

Med Control Medi har en mulighet til å kopiere en signal som er innlært og grunnkanaler til andre plasser (knapper).

MERK: Koden/kanalen blir liggende igjen på den opprinnelige plassen.

1. Trykk først på og så samtidig på i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 1 blinker.
2. Trykk på .
3. Velg nivå med og trykk på den knapp hvor signalet skal kopieres fra.
4. Velg så det nivået hvor signalet skal kopieres til med . Trykk på den knapp hvor signalet skal kopieres til.
5. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Kopiere knapp

+ 2 sek, , velg nivå og knapp som skal kopieres , velg nivå og knapp til hvor signalet skal kopieres.

3.9 Tilbakemelding ved knapptrykk

Control Medi gir alltid tilbakemelding med lys når man trykker på en knapp. Men man kan også få tilbakemelding med lyd og vibrasjon. Det kan være tilbakemelding fra alle tre samtidig, eller velg en av dem (lys er alltid på).

Gjør følgende for og endre lyd og vibrasjons styrken.

1. Trykk først på og så samtidig på i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 2 blinker.
2. Trykk på .
- 3a. Lydstyrke:
Trykk for å senke lyden, trykk for å heve lyden. Fortsett å trykke inntil ønsket volum er satt.
og/eller:
- 3b. Vibrasjonsstyrke:
Trykk for å minske vibrasjonen, trykk for å øke vibrasjonen. Fortsett å trykke inntil ønsket vibrasjon er satt.
4. Avslutt med å trykke på i 2 sekunder.
5. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Endre styrken på lyd og vibrasjon






+ 2 sek, , velg innstilling, 2 sek.

= Senke volumet. = Øke volumet. = Minske vibrasjonen. = Øke vibrasjonen.

Grunninnstilling: Lydsignal = 1 (0 – 5) Vibrasjon = 1 (0 – 5)

3.10 Innstilling av knappeforsinkelse

Med Control Medi har en mulighet til å stille knappeforsinkelsen for aktivering av knapper, altså den tid som en knapp må holdes inne før den blir aktivert. Knappforsinkelsen kan stilles inn fra 1 til 4 der 1 er ingen forsinkelse (av) og 4 er maks forsinkelse (1 sekund).

1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 2 blinker.
2. Trykk på .
3. Velg så nivået på knappeforsinkelsen.  er av og  är maks.
4. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Innstilling av knappeforsinkelse

 +  2 sek, , velg innstilling.






 = 0 sek,  = 0,3 sek.  = 0,6 sek.  = 1 sek.

Grunninnstilling: Knappforsinkelse = AV (0 sek.)

3.11 Repetere siste funksjon

I Control Medi Multi kan man ha en knapp som repeterer den sist sendte funksjonen.

Gjør følgende for å legge inn repeterer siste funksjon på valgfri knapp:

1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 2 blinker.
2. Trykk på .
3. Trykk på  for å velge nivå.
4. Trykk på ønsket knapp  på det valgte nivået.
5. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

For å fjerne "repetere siste funksjon" gjør man en tilbakestilling av knappen, se *Tilbakestilling til grunninnstilling, tilbakestilling av en knapp.*

Repetere siste funksjon

 +  2 sek, , velg nivå og knapp .

Grunninnstilling: AV (ingen)










3.12 Lage automatisk sekvens (Makro)

Control Medi har mulighet til å sende sekvenser. Ved å trykk på **en** knapp utfører Control Medi automatisk en serie knappetrykk. For eksempel at når en svarer i telefonen slås lyden automatisk av på TV'en. Control Medi kan også læres opp til å bytte nivåer og huske hvor lang tid en knapp skal sende (maksimalt 25 sekunder per trykk). Andre allerede innlærte sekvenser kan også utgjøre en del av en ny sekvens.

En kan alltid avbryte en sending av en sekvens ved å trykke på en annen valgfri knapp.

Når en sekvens læres inn, sender Control Medi samtidig det som finnes på den knappen. Maksimalt 50 knappetrykk pr. sekvens kan læres inn.

MERK: Den knapp hvor sekvensen skal ligge lagret kan ikke være en del av sekvensen.

1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 1 blinker.
2. Trykk på .
3. Trykk på  for å starte innspillingen.
4. Trykk på de knappene som skal inngå i sekvensen.
5. Trykk først på  og så samtidig på . Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 1 blinker.
6. Trykk på .
7. Trykk på  for å avslutteinnspillingen.
8. Velg knapp  der sekvensen skal lagres.
9. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Lage automatisk sekvens (Makro)

 +  2 sek, , , lage sekvens,  + , , , velg knapp  for å lagre.

Maks. 25 sek./trykk, 50 trykk

3.13 Direktestyring

I Control Medi er det mulig å koble til en bryter for å styre en knapp. Man kan velge hvilken knapp som skal styres med bryteren.

Man kan også direktestyre to knapper med noen få sekunder mellomrom. Tiden kan være fra 2 til 8 sekunder. (Direktestyring av to knapper er fra ver. 1.0.6).

Bryteren med en 3,5 mm. jack kobles inn på siden av Control Medi-senderen.

MERK: Koble kun til brytere levert av Abilia. Hvis andre brytere brukes, brukeren er ansvarlig for bruken av produktet.

Gjør følgende for å aktivere/deaktivere direktestyring:

1. Trykk først på og så samtidig på i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 2 blinker.

2. Trykk på .

3a. Aktivere direktestyring.

Trykk på , og trykk på den knapp som skal aktiveres ved trykk på bryteren.

eller:

3b. Aktivere direktestyring av to knapper.

Trykk på , og trykk på den første knapp som skal aktiveres ved trykk på bryteren. Trykk på den andre knapp som skal aktiveres. Velg tid innen andre knapp skal aktiveres med - .

eller:

3c. Trykk på for å slå av (deaktiver) direktestyring.

4. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Aktivere/deaktivere direktestyring

Aktivere direktestyring: + 2 sek, , , velg knapp .


Aktivere direktestyring av to knapper: + 2 sek, , , velg første knapp , velg andre knapp . Velg tid - .

= 2 sek. = 4 sek. = 6 sek. = 8 sek.

Deaktiver direktestyring: + 2 sek, , .

Grunninnstilling: AV (ingen)







3.14 Kanalområde

Med Control Medi har en muligheten til å stille inn forskjellige kanalområder som senderen skal ha som arbeidsområde. Når innstillingene blir utført, forsvinner eventuelle innlærte signaler og en ny tilfeldig valgt kode legges inn på *Kode*-knappen .

Normalt trenger du ikke skifte kanalområde. Hvis flere GewaLink-sendere vil bli benyttet i det samme område og en IKKE ønsker å styre det samme utstyret, kan det være nødvendig å benytte forskjellige kanalområder.






Tabell 3 viser de forskjellige innstillingsmulighetene.

Tabell 3: Kanalområder




	Kanalområde, GewaLink-kanaler					
	00-23 	16-39 	32-55 	56-79 	80-103 	104-127 
Nivå 1	00-05	16-21	32-37	56-61	80-85	104-109
Nivå 2	06-11	22-27	38-43	62 ¹ -67	86-91	110-115
Nivå 3	12-17	28-33	44-49	68-73	92-97	116-121
Nivå 4	18-23	34-39	50-55	74-79	98-103	122-127

¹ Kanal 62 er en stoppkode og kan ikke styre noen funksjon. Derimot går det an å lære inn kanaler/koder på denne knappen som i sin tur kan styre en funksjon.

Gjør følgende for å stille inn de ulike kanalområdene:

1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 2 blinker.
2. Trykk på .
3. Velg kanalområde  til  ifølge tabell 3 ovenfor.
4. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Stille inn kanalområde

 + ^{2 sek}, , velg kanalområde.

 = 00-23,  = 16-39,  = 32-55,  = 56-79,  = 80-103,  = 104-127

Grunninnstilling: GewaLink-kanal 16-39

4. Styring med skanning

Med Control Medi Multi kan man koble til en ekstern bryter som setter i gang en skanning, som da gir deg mulighet for å styre alle 28 funksjoner med for eksempel en sug/blås bryter. Det er flere skanningsvalg, som hastighet, sykluser og startsted.

Hvilken som helst bryter med en 3,5mm jack kan kobles til på siden av Control Medi Multi.



MERK: Koble kun til brytere levert av Abilia. Hvis andre brytere brukes, brukeren er ansvarlig for bruken av produktet.

4.1 Innstilling av skanningsstart

Med Control Medi har man mulighet til å velge hvor skanningen skal starte. Valgfri knapp uavhengig av nivå. Fordelen med å starte skanningen på *Nivå*-knappen, er at man kommer raskere frem til ønsket knapp. Slik gjør man:

1. Trykk først på og så samtidig på i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 4 blinker.
2. Trykk på .
3. Trykk på ønsket knapp .
4. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Innstilling av skanningsstart

+ 2 sek, , velg knapp .

Grunninnstilling: Knapp 1

4.2 Innstilling av skanningshastighet

Skanningshastigheten kan stilles fra 0,1 til 5,0 sekunder. Skanningshastigheten er stillt til ca. 1,5 sek ved levering. Gjør følgende for å justere skanningshastigheten:

1. Trykk først på og så samtidig på i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 4 blinker.
2. Trykk på .
3. Trykk på for å minske eller for å øke skanningshastigheten. Den aktuelle hastigheten vises på knapp 1 eller 2. Fortsett og trykke til ønsket hastighet er valgt. (Trykk på for å vise hastigheten.)
4. Trykk på i 2 sekunder for å lagre.
5. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Innstilling av skanningshastighet

+ 2 sek, , trykk så ønsket valg, 2 sek






= Minske = Øke

Grunninnstilling: 1,5 sekunder






4.3 Innstilling av skanningsrunder

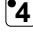Det er mulig å bestemme hvor mange runder skanningen ska gå før den stopper. Fra der skanningen starter til den er tilbake på samme sted er en runde – under forutsetning av at ingen aktivering har skjedd. Det er mulig å velge mellom 1-4 runder.

Gjør som følger for å stille inn antall runder:

1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 4 blinker.
2. Trykk på .
3. Trykk på  til  for å velge antall runder.
4. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Innstilling av skanningsrunder

 +  2 sek, , velg antall runder  til .

Grunninnstilling: 2 runder.

5. Legge inn GewaRadio (GR)

I Control Medi Multi er det mulig å styre enheter med GewaRadio (GR).

GR-enheten kan være radiomottager eller radiosender (GR-sender) fra Abilia-sortementet, eller strømbryter eller vegguttak fra Schneider (Connect) og Merten (System M).

Før man begynner å legge inn GR-kommandoer bør en vite om dette:

- Enheter som man kan styre er Gewa Andromeda, lysbrytere og stikkontakter fra Schneider fra (Connect) og Merten (system M).
- Vi anbefaler at enheten alltid nullstille (Ta bort GR-enheter) før man begynner å legge dem inn i Control Medi Multi. Har GR-enheten vært programmert tidligere, går det ikke an å legge den inn før den har blitt slettet.
- Control Medi Multi må alltid være primærsender. Det betyr at den må programmeres før andre enheter. For å legge til andre enheter anbefales det at man følger manualen.
- Når man har programmert en Control Medi Multi med en GR-enhet bør man alltid ta en backup. Man kan alltid bruke denne kopien til å legge inn på en annen sender.
- Om Control Medi Multi skulle gå i svart eller gå i stykker, fungerer fremdeles de andre senderne i systemet.

For å kunne legge in GR-kommandoer bør man kunne følgende begrep:

Legge til GR-enhet (Include)

Legge til GR-enhet som Control Medi Multi kan styre.

Ta bort GR-enhet (Exclude)

Ta bort GR-enhet fra Control Medi Multi (anbefales før programmering).

Brytere av/på (Switch Binary)

Av/på-funksjon. To knapper, en for "Av" og en for "På".

Brytere av (Basic off)

Bryter på (Basic on)

2-funksjons brytere (Switch Toggle)

Av/på-funksjon. En knapp for både "Av" og "På".

Vindusfortrekk (Window Covering)

Funksjoner for og styre gardin, markise, persienne, rullgardin (opp, ned og stopp).

Brytere Multinivåer (Switch Multi level)

En dimmerfunksjon med knapper for å øke eller minske lysstyrken.

Brytere Multinivå 2-funksjon (Switch Multi level Toggle)

Av/på-funksjon der "På" er det siste dimmernivå.

Flere kanaler (Multi Channel)

En GR-enhet kan styre flere kanaler, for eksempel kan den styre flere releer.


















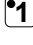







Bekreftelse

Control Medi Multi gir en tilbakemelding på om handlingen gikk som den skulle eller ikke. Om funksjonen ikke ble gjennomført kommer et signal "Ikke fullført" Det kan ta noen sekunder før signalet kommer. Denne funksjonen kan være fin når man tender et lys i et annet rom. Om den ønskede handlingen var vellykket kommer det ingen signal. Det vil si at alt er ok.

5.1 Legge inn GR-enhet og programmere GR-funksjon på valgfri knapp

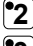For at Control Medi Multi skal kunne bruke GR-signaler må den forberedes for det. Man legger til den GR-enheten som skal styres, velger hvilket nivå og knapp den skal lagres på. og så hva den skal gjøre.

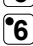Gjør følgende for å legge til GR-enhet og GR-funksjon på en knapp.

1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 5 blinker.
2. Trykk på .
3. Trykk på  for og velge ønsket nivå.
4. Trykk på ønsket knapp  på dette nivået.
5. Sett mottakeren i Include-modus, se manual for mottakeren.
6. Om GR-enhetene har fått kontakt kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil". Ved signal "Vellykket", gå videre til neste punkt. Om ikke, strtt på nytt fra 1.
7. Om mottagaren har flere kanaler (Multi Channel). Trykk på  og velg så hvilken kanal på mottakeren som skal brukes  til . Om ingen kanal velges, blir kanal 1 brukt. (Om mottakeren ikke har flere kanaler, kommer et feilsignal om man trykker på ).
8. Avhengig av hvilken type radio-mottakere som brukes kan man gjøre følgende:
 - 8a. For Bryter-funksjon (Switch Binary):
Trykk på knapp  for ønsket funksjon;
 = Bryter Av (Basic Off)
 = Bryter På (Basic On)
 = Bryter vekslende (Switch Toggle)
Eller:
 - 8b. For Vindusfortrekk (Window Covering):
Trykk på knapp  for ønsket funksjon;
 = Lukke (Close)
 = Åpne (Open)
 = Stopp (Stop)
Eller:
 - 8c. For Dimmer-funksjon (Switch Multi level):
Trykk på knapp  for ønsket funksjon;
 = Dimmer av (Dimmer Off)
 = Dimmer på (Dimmer On)
 = Bryter vekslende (Switch Multi level Toggle)
 = Maks. lys
 = Dimme mørkere (Level -)
 = Dimme lysere (Level +)
9. Om innlæringen var vellykket for første knapp, gå videre til punkt 4 for å lære inn flere knapper.
10. Avslutt med å holde inne  i 2 sekunder.
11. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".
12. Test nå de innprogrammerte funksjonene på apparatet som skal styres.

Legge inn GR-funksjon

For Bryter-funksjon

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , still ønsket enhet i Include-modus, (ved Multi Channel-mottakere: trykk , velg kanal for mottakeren), velg ønsket funksjon, Gå videre eller avslutt med 2 sek.

= Bryter Av

= Bryter På

= Bryter vekslende

For Vindusfortrekk

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , still ønsket enhet i Include-modus, (ved Multi Channel-mottakere: trykk , velg kanal for mottakeren), velg ønsket funksjon, Gå videre eller avslutt med 2 sek.

= Lukke

= Åpne

= Stopp

For Dimme-funksjon

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , still ønsket enhet i Include-modus, (ved Multi Channel-mottakere: trykk , velg kanal for mottakeren), velg ønsket funksjon, Gå videre eller avslutt med 2 sek.

= Dimmer av

= Dimmer på

= Bryter vekslende

= Maks. lys

= Dimmer mørkere

= Dimmer lysere

5.2 Ta bort GR-enhet

Gjør følgende for å ta bort (Exclude) en GR-enhet fra systemet:

1. Trykk først på og så samtidig på i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres et signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 5 blinker.
2. Trykk på .
3. Still så den GR-enhet som skal bort i Exclude-modus, se enhetens manual.
4. Om GR-enhetene har fått kontakt kommer signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Ta bort GR-enhet

+ 2 sek, , still GR-enhet i Exclude-modus.

6. Merking

Knappene er som standard merket med tall. Denne merkingen kan byttes ut og erstattes av en annen hvis en ønsker det. Man kan tilpasse merkingen ved hjelp av maler med lemplige symboler og tekst, se www.abilia.no.

Man kan også laste ned dokumentet. Merkingen kan skrives ut på overhead eller hvitt papir og stikkes ned i lommen på Control Medi. Før merkingen plasseres må overlegget fjernes. Man fjerner overlegget ved å ta tak på midten og dra fort opp (se bildet).

Til Control Medi følger det også med et A4-ark hvor en kan gjøre notater.



7. Montering av Control Medi

Control Medi kan påmonteres et klips slik at den kan bæres i belte.

Som ekstra tilbehør finnes en holder som klipses på Control Medi. Denne holderen kan også monteres sammen med en bordtvinge/rørtvinge for montering på bord eller for montering på rør. Holderen kan også monteres på et gulvstativ.



Ytterligere et alternativ er å henge senderen rundt halsen. En halsreim leveres med Control Medi.

Gjør følgende for å feste reimen til Control Medi.

1. Skru av batterilokket
2. Legg den tynne enden rundt sporet til skruen.
3. Skru på plass batterilokket
4. Juster lengden på halsreimen

⚠ ADVARSEL: Snorlåsen er en sikkerhetsdetalj som skal forhindre kvelning. Kontroller at halsbåndets ender lett kan dras ut hvis for eksempel senderen skulle sitte fast i noe. Lag aldri knuter på halsbåndet!



8. Sikkerhetskopiering og tilbakestilling


Man kan kople Control Medi til en PC for å ta en sikkerhetskopie eller tilbakestille senderen med en lagred sikkerhetskopie. Bruk tilbehøren Control Tool USB interface (seljes separat). Programvare lastes ned fra www.abilia.no.

9. Rengjøring

Control Medi kan rengjøres med en bomullsdott fuktet med Alsolsprit, Klorhexidinsprit eller Etanol. Alternativt kan Control Medi gjøres rent med en klut med vann og litt vaskemiddel. Etter rengjøring tørkes den med en tørr klut.

10. Grunninnstillinger i Control Medi Multi






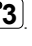



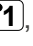
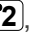
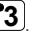
Ved levering er Control Medi Multi innstilt med noen grunninnstillinger enligt følgende:

- Knappeforsinkelse er stillet til AV
- Tilbakemelding, lydvolum er stillet til 1 (0 – 5)
- Tilbakemelding, vibrasjon er stillet til 1 (0 – 5)
- Kun nivå 1 er åpen, de andre nivåene lukket
- GewaLink-kanaler 16-39 på nivå 1-4
- En tilfeldig valgt kode på -knappen
- Skanning startes fra knapp 1 på nivå 1
- Skanningshastighet er stilt til 1,5 sekunder
- Maksimalt antall skanningsrunder er stilt til 2

10.1 Tilbakestilling til grunninnstilling

Med Control Medi har en mulighet til å tilbake stille en knapp eller tilbake stille alle knappene på et nivå eller tilbake stille hele Control Medi til grunninnstilling. Se i *Tabell 1 Grunninnstilling GewaLink-kanaler* hvilke kanaler senderen får etter tilbakestilling. Andre innstillinger går også tilbake til grunninnstilling, se ovenfor. Dersom innstillingslåsen er aktivert, må enheten låses opp først. Se *Åpne/låse innstillingslås*

Gjør følgende for å tilbake stille:





1. Trykk først på  og så samtidig på  i 2 sekunder. Når man slipper knappene høres signal "Innstilling" og indikeringslampen på knapp 3 blinker.
- 2a. Tilbakestilling av **en knapp**:
Trykk på .
Velg nivå med .
Velg den knapp  som skal tilbake stilles.
eller:
- 2b. Tilbakestilling av **alle knapper på et nivå**:
Trykk på .
Velg nivå med .
Trykk på .
eller:
- 2c. Tilbakestilling til **fabrikkinnstilling** (alle knapper på alle nivåer):
Trykk på .
Trykk i tur og orden på knappene , , .
3. Hvis handlingen var vellykket, kommer et signal "Vellykket". Er noe feil, eller handlingen tok for lang tid kommer et signal "Feil".

Tilbakestilling til grunninnstilling

Tilbake stille en knapp:

 +  2 sek, , velg nivå med , velg knapp .

Tilbake stille et nivå:

 +  2 sek, , velg nivå med , .

Fabrikkinnstilling:

 +  2 sek, , , , .

11. Tekniske data

11.1 Tekniske data

Strømforbruk ved skanning:	Ca. 8 mA
Strømforbruk ved sending:	Ca. 40 mA (GewaLink-kanal)
Inngang på ekstern bryter:	3,5 mm telepropp 2-pol
Batterilevetid (kun skanning):	Ca. 1 år (100 ggr skanning/dag og 100 sek. sending/dag med GewaLink-kanal)
Batterilevetid (kun knapper):	Ca. 2 år (100 sek sendning/dag med GewaLink-kanal)
Programmeringsplasser:	28 stk.
Manøverkraft på knapper:	< 160 gram
Rekkevidde:	40-50 m (GewaLink-kanaler)
EMC-standard emissjon: " immunitet:	EN 301 489-3 V1.4.1:2002, EN(IEC) 61000-6-2:2005, EN(IEC) 61000-6-3:2007, selected parts from EN 300 220-2 V2.3.1:2010
Dataanslutning:	Via 429252 Control Tool USB interface
Fysisk mål (L x B x H):	100 x 55 x 22 mm, inkludert gummiføtter
Vekt inkl batterier:	105 gram
Temperaturområde (ekskl batterier):	-20°C – +45°C

11.2 Tilbehør som følger med Control Medi Multi

Art.nr	Benevning	Beskrivelse	Antall
429255	Control Medi Labelling 8	Merking av knapper	1 stk.
-	Noteringsark	A4-ark for notering av innlærte kanaler	1 stk.
429257	Control Medi Keyguard 8	Overlegg for 8 knapper	1 stk.
890410	Halsreim		1 stk.
8375	Batteri	LR03 (AAA) 1,5 V	3 stk.

11.3 Øvrig tilbehør til Control Medi

Art.nr	Benevning	Beskrivelse
429249	Control Medi Holder 6 mm Hole	For og feste på forskjellige stativ med 6 med mer hull
429250	Control Medi Holder 10 mm Pipe	For og feste Control Medi på 10mm rør system
429251	Control Medi Belt Clip	For og feste på belte
429252	Control Tool USB interface	Adapter for og koble Control Medi til PC

12. Lagring og kassering

12.1 Oppbevaring

Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur og borte fra fuktighet.

12.2 Kassering

Gewa Control Medi Multi inneholder elektriske komponenter som må resirkuleres. Kasser produktet på et egnet sted.



13. Sammenstilling Hurtigguide Gewa Control Medi Multi

Åpne/låse innstillingslås

+ 2 sek, , trykk deretter ønsket valg eller .

= Åpne. = Låse.

Grunninnstilling: Åpnet

Åpne/lukke nivå

+ 2 sek, , velg nivå med , trykk deretter ønsket valg eller , 2sek.

= Lukke. = Åpne.

Grunninnstilling: Nivå 1 åpnet

Innlæring av IR-kanaler

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , velg knapp , gå videre eller avslutt med 2 sek

Legg inn 4096-kode

+ 2 sek, , , velg nivå med , velg knapp , trykk eller 12 ganger.

= Off-stilling. = On-stilling.

Grunninnstilling: Tilfeldig kode

Kopiere knapp

+ 2 sek, , velg nivå og knapp som skal kopieres , velg nivå og knapp til hvor signalet skal kopieres.

Endre styrken på lyd og vibrasjon

+ 2 sek, , velg innstilling, 2 sek.

= Senke volumet. = Øke volumet. = Minske vibrasjonen. = Øke vibrasjonen.

Grunninnstilling: Lydsignal = 1 (0 – 5) Vibrasjon = 1 (0 – 5)

Innstilling av knappforsinkelse

+ 2 sek, , velg innstilling.

= 0 sek, = 0,3 sek. = 0,6 sek. = 1 sek.

Grunninnstilling: Knappeforsinkelse = AV (0 sek.)

Repetere siste funksjon

+ 2 sek, , velg nivå og knapp .

Grunninnstilling: AV (ingen)

Lage automatisk sekvens (Makro)

+ 2 sek, , , lage sekvens, + , , , velg knapp for å lagre.

Maks. 25 sek./trykk, 50 trykk

Aktivere/deaktivere direktestyring

Aktivere direktestyring: + 2 sek, , , velg knapp .

Aktivere direktestyring av to knapper: + 2 sek, , , velg første knapp , velg andre knapp . Velg tid - .

= 2 sek. = 4 sek. = 6 sek. = 8 sek.

Deaktiver direktestyring: + 2 sek, , .

Grunninnstilling: AV (ingen)

Stille inn kanalområde

+ 2 sek, , velg kanalområde.

= 00-23, = 16-39, = 32-55, = 56-79, = 80-103, = 104-127

Grunninnstilling: GewaLink-kanal 16-39

Innstilling av skanningsstart

+ 2 sek, , velg knapp .

Grunninnstilling: Knapp 1

Innstilling av skanningshastighet

+ 2 sek, , trykk så ønsket valg, 2 sek

= Minske = Øke

Grunninnstilling: 1,5 sekunder

Innstilling av skanningsrunder

+ 2 sek, , velg antall runder til .

Grunninnstilling: 2 runder.

Legge inn GR-funksjon

For Bryter-funksjon

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , still ønsket enhet i Include-modus, (ved Multi Channel-mottakere: trykk , velg kanal for mottakeren), velg ønsket funksjon, Gå videre eller avslutt med 2 sek.

= Bryter Av

= Bryter På

= Bryter vekslende

For Vindusfortrekk

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , still ønsket enhet i Include-modus, (ved Multi Channel-mottakere: trykk , velg kanal for mottakeren), velg ønsket funksjon, Gå videre eller avslutt med 2 sek.

= Lukke

= Åpne

= Stopp

For Dimme-funksjon

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp , still ønsket enhet i Include-modus, (ved Multi Channel-mottakere: trykk , velg kanal for mottakeren), velg ønsket funksjon, Gå videre eller avslutt med 2 sek.

= Dimmer av

= Dimmer på

= Bryter vekslende

= Maks. lys

= Dimmer mørkere

= Dimmer lysere

Ta bort GR-enhet

+ 2 sek, , still GR-enhet i Exclude-modus.

Tilbakestilling til grunninnstilling

Tilbakestill en knapp:

+ 2 sek, , velg nivå med , velg knapp .

Tilbakestill et nivå:

+ 2 sek, , velg nivå med , .

Fabrikkinnstilling:

+ 2 sek, , , , .

Kontaktinformasjon

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden

Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norway

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway

Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

United Kingdom

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom

Telefon+44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

429200-3_Brukerveiledning_Control Medi Multi_NO Mars 2021

