

 **PICOMED** VI SKAPER FORANDRING SOM SPREDER GLEDE!

BrightSign Tegn-til-tale hanske

Har du noen gang brukt et tegn og ikke blitt forstått?
Har du noen gang pratet med noen med noen med tegn-til-tale og misforstått?

Med BrightSign kan du lære hansken dine personlige tegn og de vil bli uttalt av telefonen din eller en ekstern høyttaler.

Du skaper ditt eget bibliotek ved å lære hansken tegn og hva som skal bli sagt. Hansken kan lære ubegrenset antall tegn. Batterikapasiteten gjør at du kan bruke den hele dagen.

BrightSign kan oversette tegnene til over 40 språk, om du skal på ferie til Spania eller Italia kan du gjøre deg forstått her også.



Tegn



Tale




Oversette



Transkribere

Picomed as | Gjerstadveien 398 | 4993 Sundebru | Telefon 37 11 99 50 | post@picomed.no | www.picomed.no

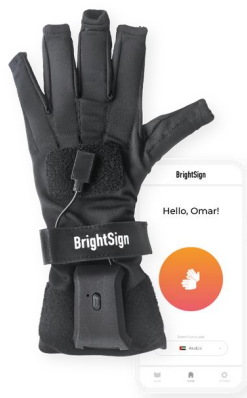

 **PICOMED** VI SKAPER FORANDRING SOM SPREER GLEDE!

Tekniske spesifikasjoner	
Tekstil	Ultra-stretch stoff. Pustende stoff.
Batteri	Li-ion batteri. Forsterket kabinett med temperatur-, strøm- og spenningsavbrudd for full sikkerhet. 1A micro-USB lader 10 timer batteritid ved kontinuerlig bruk.
Algoritme	Maskin som må læres opp. Ubegrenset antall tegn.
Stemmer	Neural Speech Generation algoritmer fra flere leverandører.
Bluetooth	BLE 5.0 10 meters rekkevidde.
Sensorer	4 strekksensorer med høy nøyaktighet med 2048 nivåer av bøyingsfølsomhet 3D splay-sensor for å fange fullstendig tommelbevegelse med 2048 nivåer av bøyingsfølsomhet i hver dimensjon Håndleddets treghetsensor (3D-gyroskop og 3D-akselerometer) for nøyaktig måling av håndorientering og dynamisk bevegelse. Prøver verdier 120 ganger per sekund.
App	BrightSign Kompatibel med Android og Iphone
Språk	Over 40 språk